

EDGE  UTOPIA™



**Innowacyjność połączona
z wysoką jakością i wydajnością**

System stworzony przez endodontę dla endodontów


EdgeEndo® sukces Twojego gabinetu

Firma EdgeEndo została założona w 2012 roku przez amerykańskiego endodontę, dr Charlesa Goodisa. Misją EdgeEndo jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań stomatologicznych, w przystępnych cenach, dzięki czemu leczenie kanałowe staje się bezpieczne, łatwe i opłacalne.

Rozwiązanie - Innowacja połączona z wysokimi standardami jakości. Wszystko po to, aby wspierać rozwój praktyk stomatologicznych poprzez oszczędność czasu i zapewnienie wyjątkowych wyników leczenia.

W swojej dziesięcioletniej historii, EdgeEndo pracowało nad zrewolucjonizowaniem branży endodontycznej w Stanach Zjednoczonych, będąc liderem innowacyjnych rozwiązań endodontycznych.

Zoptymalizuj procedury endodontyczne dzięki EdgeEndo

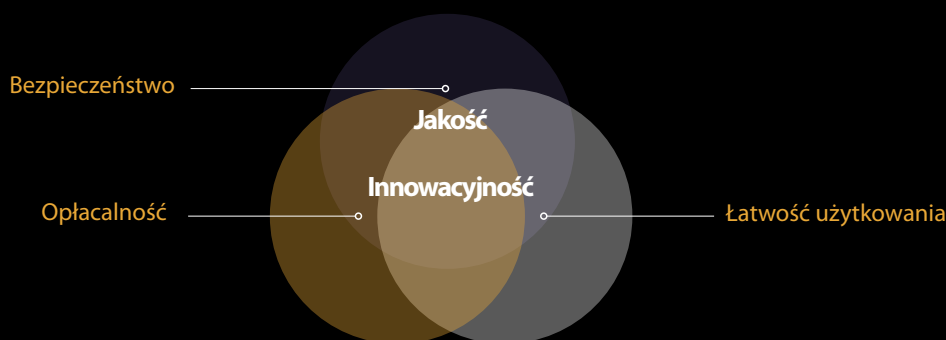

Bezpieczeństwo – Rozwiązania EdgeEndo® są opracowane z myślą o pacjencie. Proces obróbki termicznej FireWire Blaze zapewnia wysoką odporność na cykliczne zmęczenie narzędzia, a także wpływa na jego elastyczność, dzięki której narzędzie zachowuje anatomię kanału. Wszystko to dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa.

Łatwość użytkowania – Zmiana nawyków jest zawsze wyzwaniem dla każdego stomatologa. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania pilników, które są kompatybilne ze wszystkimi technikami endodontycznymi. EdgeEndo® stale rozszerza swoją ofertę produktów, aby procedura endodontyczna była kompletna.

Opłacalność – EdgeEndo® udowodniło, że jakość nie musi się wiązać z wysoką ceną. Naszym celem jest uczynienie leczenia kanałowego dostępnym dla każdego, bez kompromisów.


Misją EdgeEndo® jest dostarczanie innowacyjnych produktów i rozwiązań

Innowacyjność – EdgeEndo® jest wynalazcą FireWire i FireWire Blaze, unikalnej kombinacji obróbki cieplnej, dzięki czemu narzędzia (NiTi) zapewniają niesamowitą elastyczność i odporność na zmęczenia cykliczne.

Jakość – Tysiące klinicystów zaufało doświadczeniu EdgeEndo® oraz misji dostarczania produktów najwyższej jakości. Instrumenty produkowane są w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Francji pod ścisłą kontrolą wszystkich procesów produkcyjnych, ponieważ bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Rozwój

Firma EdgeEndo® dostarcza innowacyjne rozwiązania endodontom i dentystom, a dzięki współpracy z Henry Schein dociera do ponad 1 miliona lekarzy na całym świecie. EdgeEndo® jest obecnie jednym z największych na świecie producentem narzędzi rotacyjnych oferującym naszym partnerom wysokiej jakości pilniki na różnych rynkach.

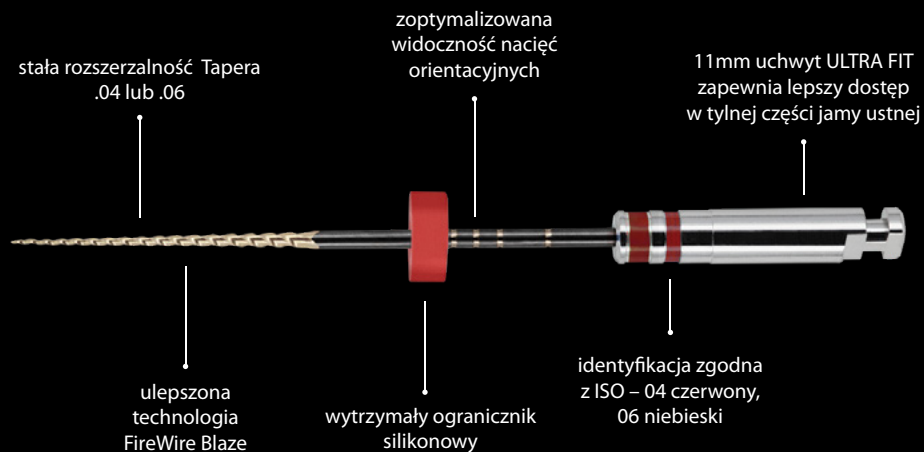

Przekrój paraboliczny



Wysoka efektywność cięcia



Bezpieczne rozkręcanie



Nie sprężynuje



Wysoka wytrzymałość

- Dostępne w wersji o stałej rozszerzalności Taper .04 i .06
- Maksymalna średnica 1 mm pozwala na minimalnie inwazyjną preparację
- Końcówka nietnąca o przekroju parabolicznym maksymalizuje wydajność cięcia pilnikiem
- Zredukowana długość trzonka dla lepszego dostępu z tyłu jamy ustnej
- Rozmiar końcówki ISO 17-45
- Dostępne długości: 21, 25 i 29 mm
- Technologia FireWire Blaze
- Sterylne opakowanie
- Ostrzejsza alternatywa EdgeFile® X7
- Taka sama sekwencja pracy jak w przypadku EdgeFile® X7
- Bezpieczny uchwyt ULTRA-FIT Secure Shank
- Wyjątkowy wygląd pilnika

Opakowanie sterylne 6 sztuk	Rozmiar końcówki	Rozmiar pilnika maszynowego	Długość		
			21 mm	25 mm	29 mm
	15	04 & 06	Wkrótce w sprzedaży		
	17	04	9885415	9885422	9885429
		06	9885436	9885443	9885450
	20	04	9885416	9885423	9885430
		06	9885437	9885444	9885451
	25	04	9885417	9885424	9885431
		06	9885438	9885445	9885452
	30	04	9885418	9885425	9885432
		06	9885439	9885446	9885453
	35	04	9885419	9885426	9885433
		06	9885440	9885447	9885454
	40	04	9885420	9885427	9885434
		06	9885441	9885448	9885455
	45	04	9885421	9885428	9885435
		06	9885442	9885449	9885456
Asortyment		04	9885462	9885463	
		06	9885464	9885465	



Wideo




Technika uproszczona



Przypadek kliniczny

EDGETAPER BLAZE UTOPIA™

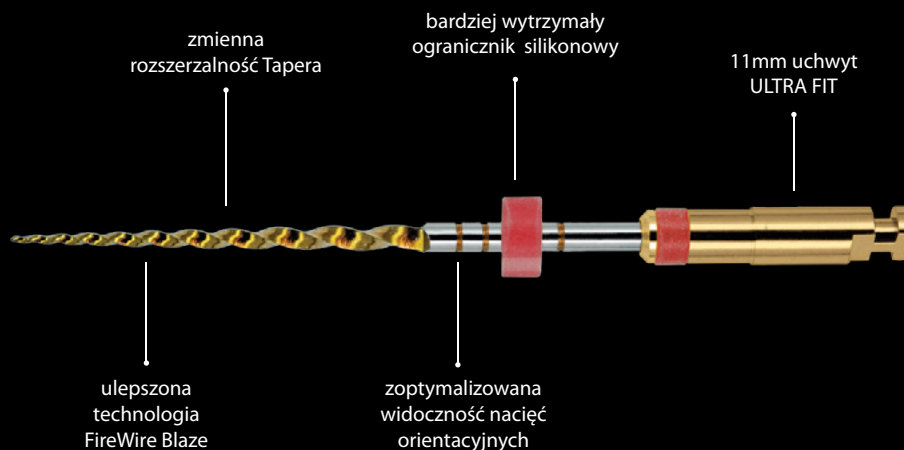

Przekrój w kształcie trójkąta



Wysoka efektywność









Bezpieczne rozkręcanie



Wysoka wytrzymałość

- Ta sama technika co EdgeTaper Platinum™
- Zwiększona wydajność
- Odporny na rozkręcanie
- Przekrój w kształcie trójkąta
- Końcówka nietnąca
- Technologia FireWire Blaze
- Bezpieczny uchwyt ULTRA-FIT Secure Shank
- Wyjątkowy nowy złoty wygląd pilnika
- Sterylne opakowanie
- Dostępne rozmiary: SX, S1, S2, F1, F2, F3
- Dostępne długości: 21, 25 i 31 mm

			Długość		
Opakowanie sterylne 6 sztuk	Rozmiar końcówki	Rozmiar pilnika maszynowego	21 mm	25 mm	31 mm
SX 	19	04v	9885396		
S1 	18	03v	9885397	9885398	9885399
S2 	20	04v	9885400	9885401	9885401
F1 	20	07v	9885403	9885404	9885405
F2 	25	08v	9885406	9885407	9885408
F3 	30	09v	9885409	9885410	9885411
Asortyment			9885412	9885413	9885414



Wideo




Technika uproszczona



Przypadek kliniczny

EDGE ONE R UTOPIA™

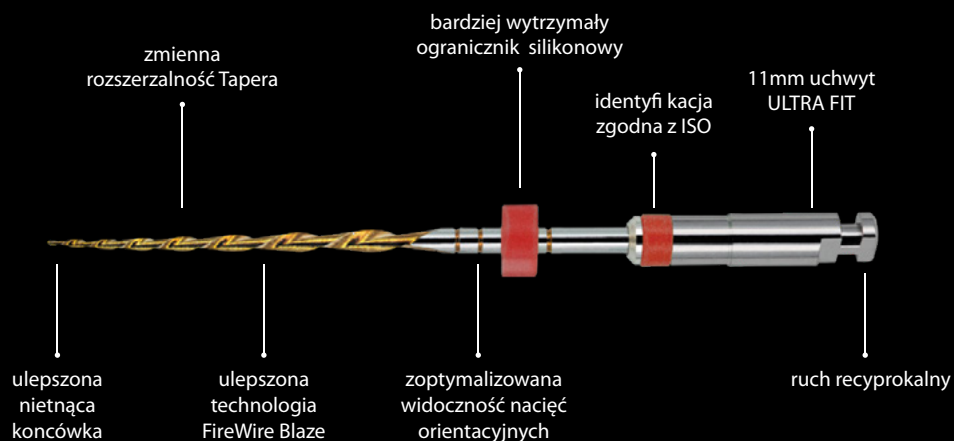

Przekrój w kształcie S



Wysoka efektywność



Bezpieczne rozkręcanie



Wysoka wytrzymałość

- EdgeOne R Utopia™ może być używany z dowolnym mikrosilnikiem przystosowanym do pracy w ruchu recyprokalnym
- Kształtuje kanały z zastosowaniem ruchu recyprokalnego
- Kodowanie kolorami ISO
- Przekrój w kształcie S
- Usprawnione usuwanie zanieczyszczeń
- Końcówka nietnąca
- Zmniejszona długość trzonka dla lepszego dostępu z tyłu jamy ustnej
- Dostępne długości: 21, 25 i 31 mm
- Technologia FireWire Blaze
- Bezpieczny uchwyt ULTRA-FIT Secure Shank
- Wyjątkowy nowy złoty wygląd pilnika
- Sterylne opakowanie
- Dostępne rozmiary: R-Glide, R-20, R25, R40 i R50

			Długość		
Opakowanie sterylne 6 sztuk	Rozmiar końcówki	Rozmiar pilnika maszynowego	21 mm	25 mm	31 mm
	14	04v	Wkrótce w sprzedaży		
	20	08v	9885458	9885459	9885460
	25	08v	9885384	9885385	9885386
	40	06v	9885387	9885388	9885389
	50	05v	9885390	9885391	9885392
Asortyment			9885393	9885394	9885395




Wideo



Technika uproszczona

ĆWIEKI GUTAPERKOWE

- Posiadają oznaczenia długości ułatwiające wypełnienie kanału korzeniowego
- Dopasowanie pojedynczego ćwieka
- Standardowa długość: 29 mm +/-1
- Wysoka biokompatybilność
- Wysoka nieprzepuszczalność promieniowania nawet GP: 30-40% wyższa
- Ćwieki są poddawane opatentowanemu procesowi usztywniania w celu poprawy ułożenia i zmniejszenia załamań / zginania końcówek
- Doskonali do stosowania z wszelkiego rodzaju uszczelniaczami: intensywne wiązanie
- Oznaczenie długości: skalibrowane na 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm i 24 mm

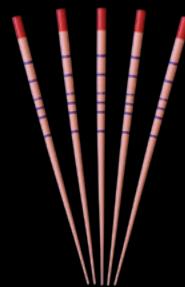

60 sztuk

	Rozmiar końcówki	Kod produktu
Rodzina X7 (zweżająca się do 12 mm, a następnie równoległa)		
.04	17	5722057
	20	5722059
	25	5722061
	30	5722063
	35	5722065
	40	5722067
	45	5722069
Asortyment		5722071
.06	17	5722058
	20	5722060
	25	5722062
	30	5722064
	35	5722066
	40	5722068
	45	5722070
Asortyment		5722072
Rodzina EdgeOne R		
	R20	5722119
	R25	5722120
	R40	5722123
	R50	5722124
Asortyment		5722125
Rodzina EdgeTaper		
F1	20	5722126
F2	25	5722127
F3	30	5722128
F4	40	5722129
F5	50	5722130
Asortyment		5722131
.04 (stałe zwięźenie)		

.04	15	5722073
	20	5722075
	25	5722077
	30	5722077
	35	5722081
	40	5722083
	45	5722085
Asortyment		5722087
Asortyment		5722089
.06 (stałe zwięźenie)		
.06	15	5722074
	20	5722076
	25	5722076
	30	5722080
	35	5722082
	40	5722084
	45	5722086
	50	5722088
Różne opakowania (20, 25, 30, 35, 40, 45)		5722090
Rodzina EdgeOne Fire		
EdgeOne Fire™	Małe	5722109
	Podstawowe	5722110
	Średnie	5722111
	Duże	5722112
Asortyment		5722113

SĄCZKI PAPIEROWE

- Zawierają oznaczenie długości w celu dokładnego wprowadzenia do kanału
- Sączki mają standardową długość 29 mm +/-1



60 sztuk

	Rozmiar końcówki	Kod produktu
Rodzina EdgeTaper		
F1	20	5722132
F2	25	5722133
F3	30	5722133
F4	40	5722135
F5	50	5722136
Asortyment		5722137
.04 (zweźająca się do 12 mm, a następnie równoległa)		
.04	15	5722091
	20	5722091
	25	5722095
	30	5722097
	35	5722099
	40	5722101
	45	5722103
50	5722103	
Asortyment		5722107
.06 (zweźająca się do 12 mm, a następnie równoległa)		
.06	15	5722092
	20	5722094
	25	5722096
	30	5722098
	35	5722100
	40	5722102
	45	5722104
50	5722104	
Asortyment		5722108
Rodzina EdgeOne Fire		
EdgeOne Fire™	Small	5722114
	Primary	5722115
	Medium	5722116
	Large	5722117
Asortyment		5722118
Rodzina EdgeOne-R Utopia		
	20	5722091
	25	5722095
	40	5722101
	50	5722105
Asortyment		5722107



Pilniki EdgeEndo nie mają pamięci kształtu, więc podążają za światłem kanału nie powodując jego zniekształceń i zachowując jego anatomie,

Bezpieczne rozkręcanie: Pilnik jest oznaczony jako bezpieczny, ponieważ rozkręca się, zanim się złamie. Sygnalizuje to lekarzowi, że nastąpiło zmęczenie cykliczne i pilnik może złamać się, jeśli będzie nadal używany.

Specjaliści ds. produktów EdgeEndo



Małgorzata Czarniawska
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie
tel. 882 432 991
malgorzata.czarniawska@marrodent.pl



Magdalena Trzeciak
śląskie, dolnośląskie, opolskie
tel. 539 018 912
magdalena.trzeciak@marrodent.pl



Maria Szpunar
podkarpackie, świętokrzyskie,
małopolskie, lubelskie
tel. 668 699 316
maria.szpunar@marrodent.pl



Marta Kuberacka
zachodniopomorskie,
lubuskie, wielkopolskie
tel. 735 930 080
marta.kuberacka@marrodent.pl



Marcin Cichosz
mazowieckie,
podlaskie, łódzkie
tel. 532 950 031
marcin.cichosz@marrodent.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce

marrodent®
A HENRY SCHEIN® COMPANY



Marrodent® A Henry Schein® Company | 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 31
sklep.marrodent.pl | edgeendo.com

©2023 EdgeEndo LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.

Wersja C 01/2024